




20bis, rue du chapitre  
30150 ROQUEMAURE  
FRANCE  
Tel : 0033 466 82 82 60  
Fax : 0033 466 90 21 10  
Email : [contact-info@cellid.com](mailto:contact-info@cellid.com)  
Web : [www.cellid.com](http://www.cellid.com)

## EXtract 830

### Support rétractable pour des installations hygiéniques

Le système d'extraction EXtract 830 est utilisé sur des cuves ou des lignes procédés stériles et hygiéniques. Ce système permet d'insérer un capteur dans un procédé et de le retirer pour le nettoyer ou le calibrer. Il est équipé de fin de courses pneumatiques qui permettent de savoir s'il se trouve en position mesure ou service. Le nettoyage, le rinçage, la stérilisation et la calibration sont possibles en cours de procédé.

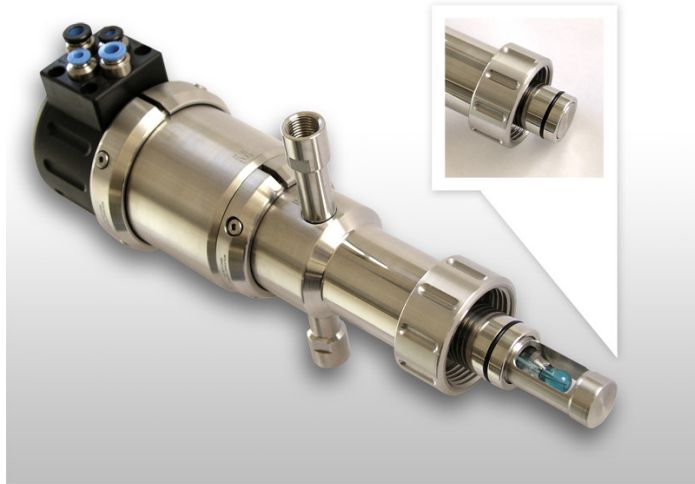


- **Plug and play**

- Facile d'utilisation, installation et maintenance aisée
- Etanchéité, par joints O ring, hygiénique et documentée
- Connexion procédé EHEDG/3A approuvé
- Chambre de nettoyage sans aucun volume mort
- Réalisé en acier inox 316L, avec Ra < 0,8µ u mieux
- Compatible NEP/SEP
- Matériaux en contact avec le produit et état de surface certifiés et traçables
- Conception compacte, sans volume mort
- Manipulation très simple
- Coût très compétitif

### EXtract spécifications

<b>Pression procédé</b>	0-10 bars
<b>Température procédé</b>	-10 – 140°C
<b>Température ambiante</b>	-10 – 70°C
<b>Taille des capteurs</b>	225 mm PG13,5
<b>Matériau de l'ensemble</b>	Inox 1,4404 (316L)
<b>Surface électroplie avec</b>	Ra < à 0,76µm
<b>Joint</b>	Saphir
<b>Alimentation</b>	EPDM FDA, FPM
<b>Connexion procédé</b>	Ingold DN25 Varivent N DN40-125 Triclamp 1,5" Triclamp 2" Neumo Biocontrol 50
<b>Port de nettoyage</b>	DIN 11851 DN50
<b>Fonctionnement</b>	G ¼"
<b>Contacts fin de course</b>	Air comprimé 4-6 bars Intégrés

### Dimension

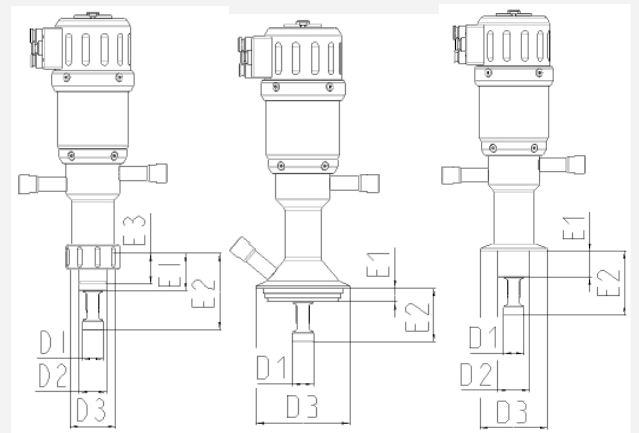



20bis, rue du chapitre  
 30150 ROQUEMAURE  
 FRANCE  
 Tel : 0033 466 82 82 60  
 Fax : 0033 466 90 21 10  
 Email : [contact-info@cellid.com](mailto:contact-info@cellid.com)  
 Web : [www.cellid.com](http://www.cellid.com)

## EXtract30 – Support rétractable

Descr.	Support, materiel en contact avec le produit
4404	Acier inox, 1.4404 / 316L
XXXX	Spécial
Descr.	Joint, materiel en contact avec le produit
EPD	EPDM FDA
FPM	FPM
XXX	Spécial
Descr.	Capteur utilisable
225	225mm PG 13.5 gel
280	280mm PG 13.5 avec liquide
XXX	Spécial
Descr.	Connexion procédé
IN28	Ingold DN25 (G1 1/4") O-Ring-Pos. 28mm
VARN	Varivent N DN40-125
TC15	TriClamp 1,5" (OD Ø50,5mm)
TC20	TriClamp 2" (OD Ø64mm)
BCT5	NEUMO BioControl 50
MV50	DIN 11851 DN50 (Milchrohr)
XXXX	Spécial
Descr.	Connexion de nettoyage
G18	G 1/8" (interne)
G14	G 1/4" (interne)
N14	1/4" NPT (interne)
XXX	Spécial
Descr.	Fin de course
PN	pneumatique
XX	Spécial
<b>EXTRACT 830</b>	<b>Numéro d'item</b>